

ARX方舟无限aloha数据采集系统使用手册

1 安全概要

⚠本产品为实验性产品，仅供科研实验场景使用，操作前请严格按照用户手册进行，如不按用户手册使用，若导致安全事故，后果自负。

⚠使用本产品具有一定的安全风险，建议用户首先观看本章节内容，再阅读后面的内容了解具体的使用过程。

⚠使用前请先阅读《X5 数据采集系统用户手册》

运行环境

1. 工作温度为 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，请勿在温度低于 0°C 、高于 40°C 环境中使用
2. 请勿在存在腐蚀性、易燃性气体的环境或者靠近可燃性物质的环境中使用
3. 请不要在加热器或者大型卷线电阻等发热体周围使用
4. 建议使用环境海拔高度不超过1000M
5. 建议使用环境昼夜温差不超过 25°C

运行前检查

1. 确保与机器人共同工作的所有人员都接受过充分的培训，能够遵守操作规范，

安全操控机械臂

2. 确保机械臂正常供电
3. 确保机械臂周围无异物
4. 确保机械臂初始化完成
5. 确保机械臂安装牢固
6. 确保相机以及机械臂各关节电机的清洁

机械臂运行时操作

1. 运行时所有人员请远离机械臂工作空间
2. 机械臂停止空中时，断电前请手扶着机械臂，然后断电，手托机械臂归零位
3. 切勿在机械臂正常运转时断开电源

4. 切勿在机械臂正常运转时断开机械臂的ecat2can线
5. 模型推理时，请远离无关设备，防止机械臂掉落损坏设备
6. 机械臂模型推理时请远离机械臂工作空间
7. 如果机械臂推理发生错误导致机械臂运动紊乱，请立即中断推理程序
8. 如果推理程序无法中断导致机械臂运动紊乱，请立即关闭机械臂电源

注意事项

警告：电气危害

1. 如果不依照规范安全使用机械臂上的电子组件，可能导致设备损坏或人身伤害。
2. 请勿在机械臂上电时对其内部件执行任何操作；

小心：坠落危害

1. 机械臂突然断电，由于重力作用会导致机械臂掉落，从而导致机械臂损坏
2. 机械臂ecat2can线突然断开，会导致机械臂掉落，从而导致机械臂损坏
3. 模型推理时，请远离无关设备，防止机械臂掉落损坏设备

操作注意事项

1. 首次启动系统和设备前，必须检查设备和系统是否完整，操作是否完全，检查机械臂和其他设备系统是否遭到损坏
2. 在使用机械臂前，需要对机器人及周边防护系统进行初步测试和检查
3. 在使用机械臂前，操作人员必须经过相应培训，必须确保输入的参数和操作是正确的
4. 机器人使用时，请无关人员远离机械臂的工作空间
5. 机械臂在发生意外时运行不正常的情况下，可以立即断开机械臂电源，但是断开机械臂电源可能会导致机械臂在掉落过程中损坏。
6. 请勿随意断开机械臂电源和机械臂 ecat2can线，断开后，机械臂会掉落，出现会损坏机械臂，磕碰到其他物品。
7. 在机械臂作业时，切勿有人或其他设备出现在作业范围内
8. 切勿将手指伸到末端执行器以及线性模组连接处
9. 确保机械臂的工作空间没有障碍物

10. 切勿擅自对机械臂内部系统包括软件系统和硬件系统进行改动
11. 在机械臂运输或搬运过程中，做好防撞防水措施
12. 在机械臂运输或搬运过程中，做好保护好相应的传感器，确保传感器的安装位置以及姿态没有被调整
13. 当机械臂与其他机械协作时，应对整个协助系统做全面的安全评估
14. 切勿随意执行机械臂的模型推理过程
15. 机械臂不使用情况下，请将机械臂归零位
16. 机械臂为易损件，请勿暴力使用

本项目根据[mobile-aloha](#)和[act-plus-plus](#)修改而来，感谢[Zipeng Fu](#)，[Tony Z. Zhao](#)，[Chelsea Finn](#)的开源工作。

项目地址：

运行环境：ubuntu20.04，python3.8.10，ros1-noetic，torch-2.2.0+cu121

2 快速开始

2.1 创建虚拟环境

进入[mobile_aloha](#)文件夹，运行 `venv.sh` 脚本

```
1 cd mobile_aloha
2 bash venv.sh
```

2.2 编译相机驱动

- 依赖项安装

```
1 sudo apt-get install -y libudev-dev pkg-config libgtk-3-dev
2 sudo apt-get install -y libusb-1.0-0-dev pkg-config
3 sudo apt-get install -y libglfw3-dev
4 sudo apt-get install -y libssl-dev
```

- realsense库安装

```
1 git clone https://github.com/IntelRealSense/librealsense.git
```

```
2
3 cd librealsense
4 mkdir build
5 cd build
6 cmake ../ -DBUILD_EXAMPLES=true
7 make
8 sudo make install
```

- 添加udev规则

```
1 sudo cp config/99-realsense-libusb.rules /etc/udev/rules.d/
2 sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
```

- 编译相机工作空间

```
1 cd realsense_camera
2 sudo apt install -y ros-noetic-ddynamic-reconfigure
3 catkin_make
```

在电脑上连接realsense d405的usb

```
1 source ./devel/setup.bash
2 rosrn realsense2_camera list_devices_node
```

终端显示{#终端显示}

显示如下： 表示相机未连接,请重新拔插usb

No device connected, please connect a RealSense device

[ERROR] [1712214870.788135105]: No device connected, please connect a RealSense device

list SN is empty

显示如下： 表示三个相机已成功连接

Found the following devices:

Serial number: 230322275966

Serial number: 230322272285

Serial number: 230322273049

将获取到的Serial number分别填入src/ros_realsense2_camera/launch中的
rs_multiple_devices.launch文件里的serial_no_camera中

```
<launch>
  <arg name="serial_no_camera1"          default="230322275966"/>
  <arg name="serial_no_camera2"          default="230322272285"/>
  <arg name="serial_no_camera3"          default="230322273049"/>
```

2.3 编译机械臂

```
1 git clone https://github.com/ARXroboticsX/ARX_L5_SDK.git
2 cd ARX_L5_SDK
3
4 bash make.sh
```

详细信息请参考《L5 数据采集系统用户手册.pdf》

3 数据采集

3.1 准备工作

- 运行realsense_camera中的 `realsense.sh` 脚本
- 运行ARX-L5-SDK中的 `remote.sh` 脚本

查看topic消息

```
1 source follow1/devel/setup.sh
2
3 # 机械臂控制信息
4 rostopic echo /joint_control
5 rostopic echo /joint_control2
```

3.2 采集数据

-
- 切记所有人员请远离机械臂工作空间
 - 切勿暴力操作机械臂
 - 如机械臂发生紧急情况, 请立即断电

在**mobile_aloha**中 `source venv/bin/activate` 后执行 `python collect_data.py` 即可操作机械臂采集数据

在默认参数下，会产生数据集 `episode_0.hdf5` 保存到**mobile_aloha/datasets**文件夹中，该工程目录如下

```
mobile_aloha
├── collect_data.py
├── datasets # --datasets 数据集保存路径
│   ├── episode_0.hdf5 # 产生的数据集文件
│   ├── episode_idx.hdf5 # idx由--episode_idx参数决定
│   └── ...
├── readme.md
└── requirements.txt
```

`collect_data.py` 主要命令行参数：

- `--datasets`：采集数据集存放路径
- `--episode_idx`：数据集索引号
- `--frame_rate`：采集帧率
- `--max_timesteps`：采集时长
- `--use_depth_image`：是否采集深度图（默认为false）
- `--use_robot_base`：是否启用底盘（默认为false）
- `--is_compress`：是否使用压缩图像（默认为false）

注：

1. 操作人员操作主臂，从臂就会随动
2. 切记所有人员请远离机械臂工作空间，切勿暴力操作机械臂
3. 推荐采集压缩图像

3.3 可视化数据集

在**mobile_aloha**中 `source venv/bin/activate` 后执行 `python visualize_episodes.py --datasets ./datasets --episode_idx 0` 即可可视化数据集


将3.2采集的数据集进行可视化运行上述代码，其中 `--datasets` 和 `--episode_idx` 需要和3.2采集数据时相同

运行代码时，终端会打印action，并显示彩色窗口图像


运行完成后，会在`datasets`下产生 `episode_${idx}_qpos.png` 、
`episode_${idx}_base_action.png` 与 `episode_${idx}_video.mp4` 文件，目录结构如下：


```
mobile_aloha
├── visualize_episodes.py
├── datasets
│   ├── episode_0.hdf5
│   ├── episode_0_base_action.png # base_action图
│   ├── episode_0_qpos.png # qpos图
│   └── episode_0_video.mp4 # 彩色图像视频流
```

- `episode_${idx}_base_action.png`

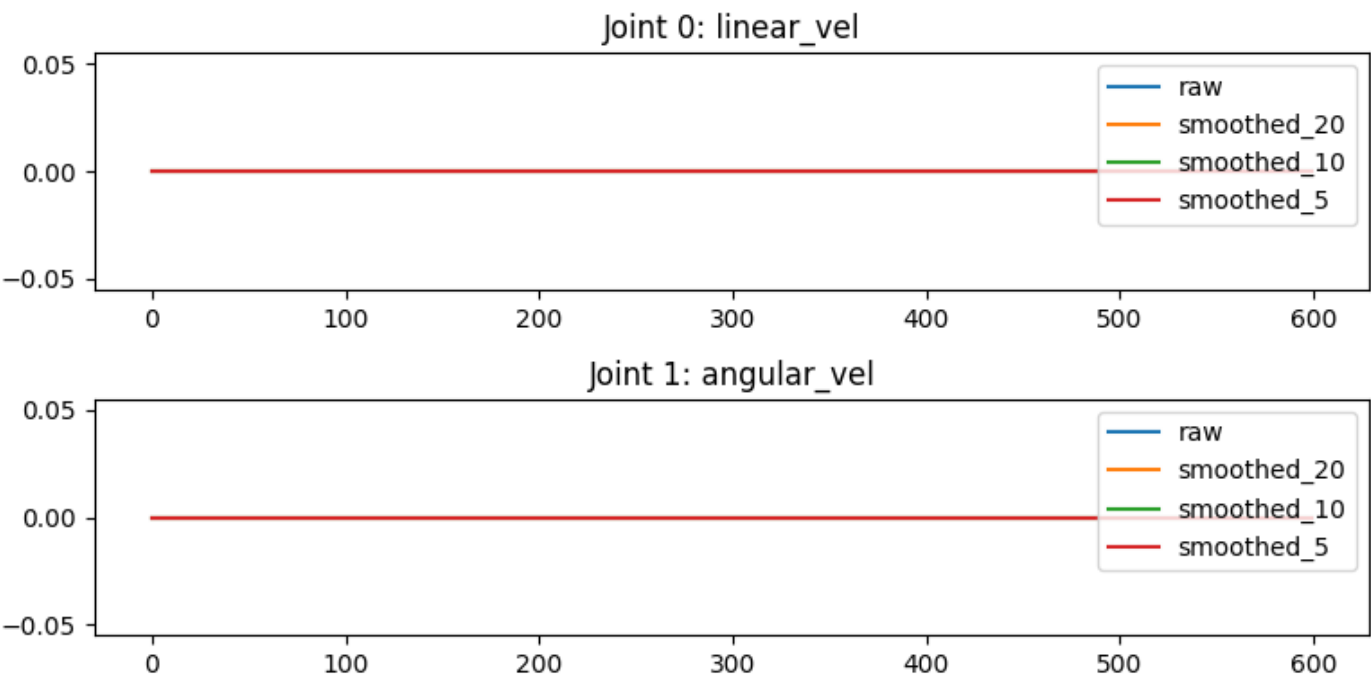


- `episode_${idx}_qpos.png`

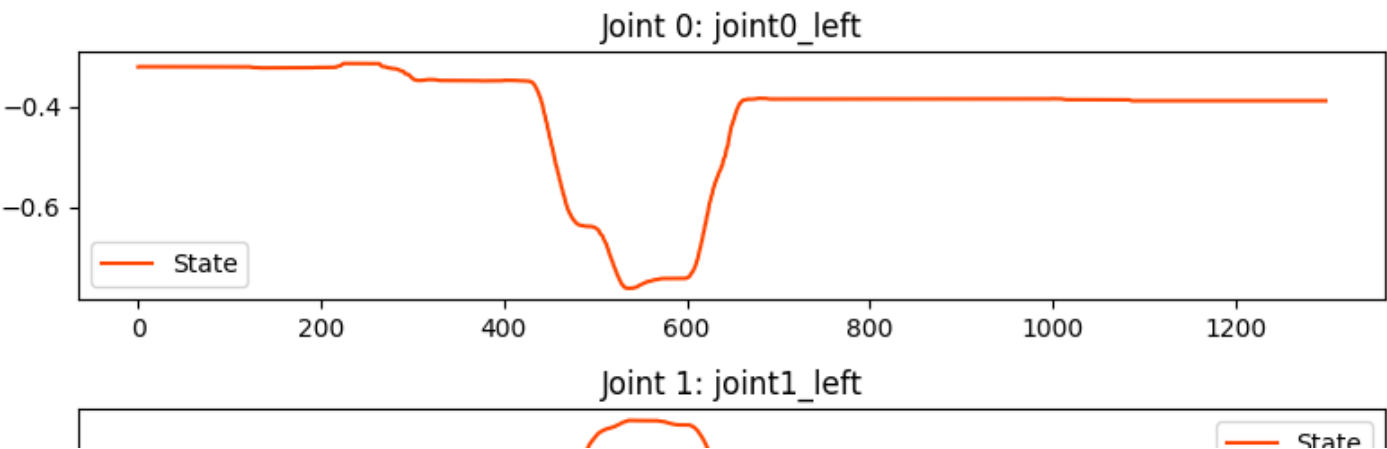


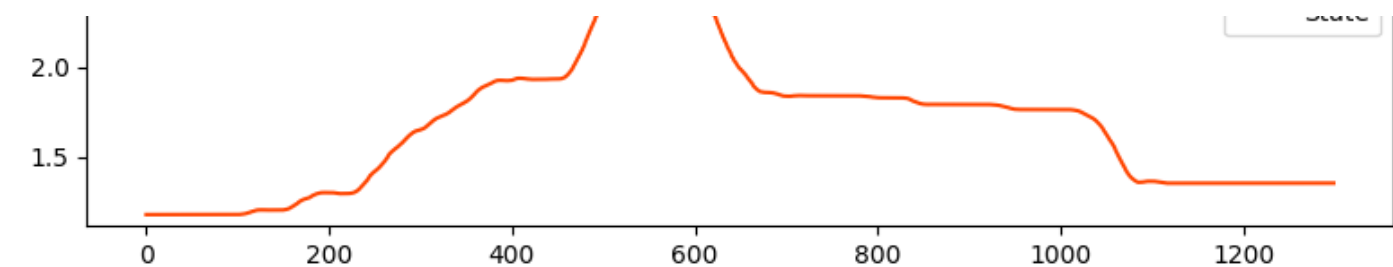


Joint 2: joint2_left

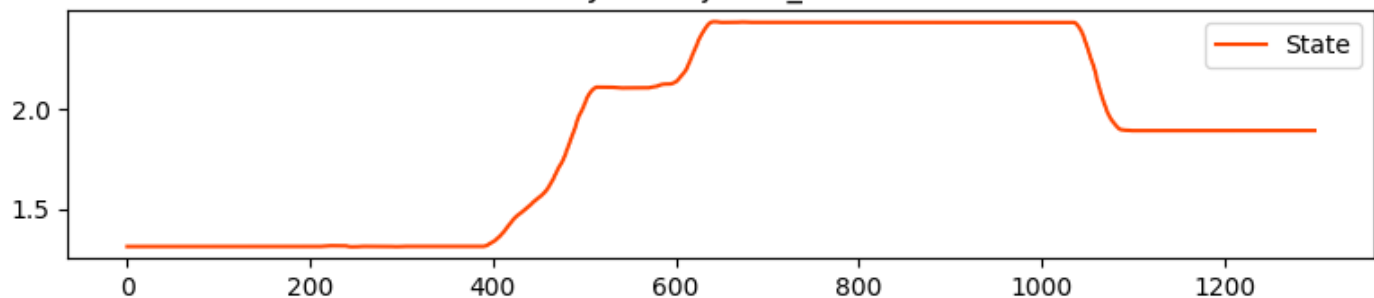


Joint 3: joint3_left

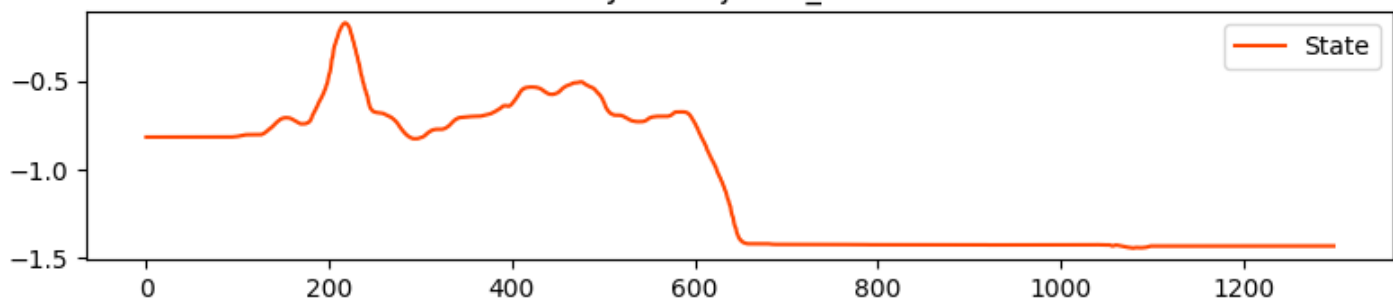


Joint 4: joint4_left

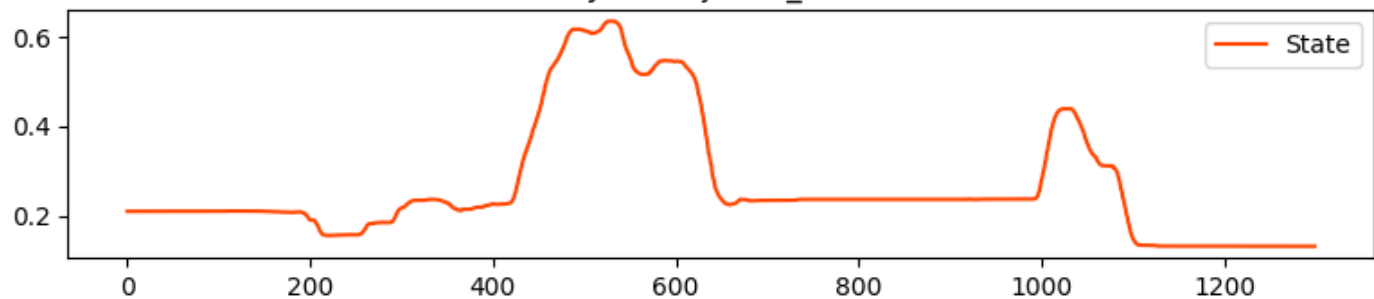


Joint 5: joint5_left

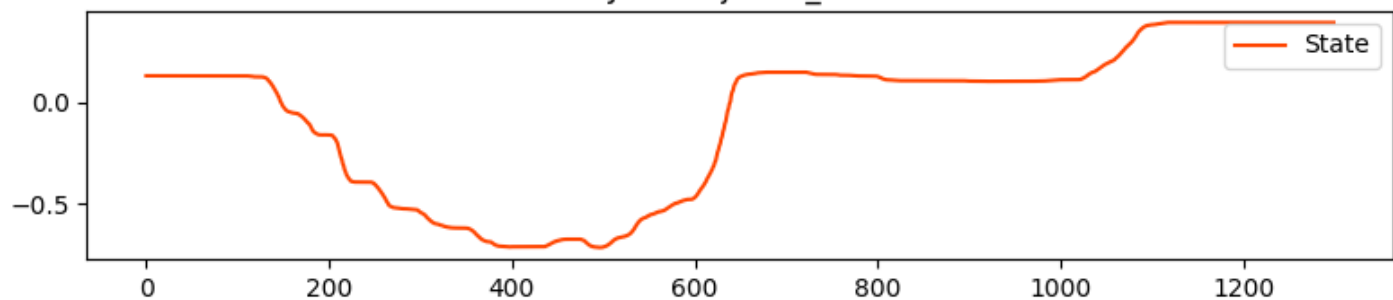


Joint 6: gripper_left

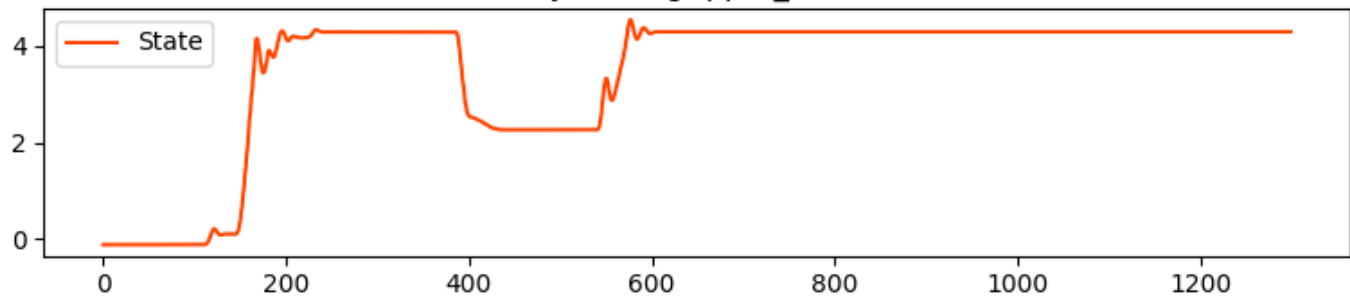


Joint 7: joint0_right

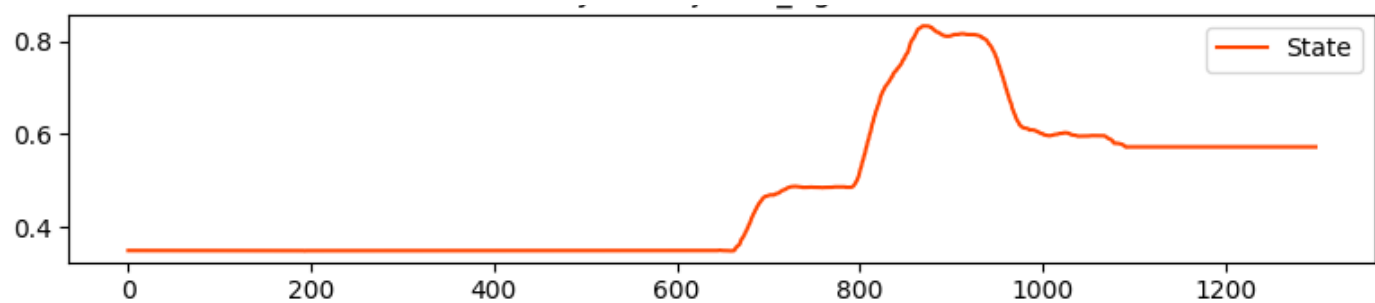


Joint 8: joint1_right

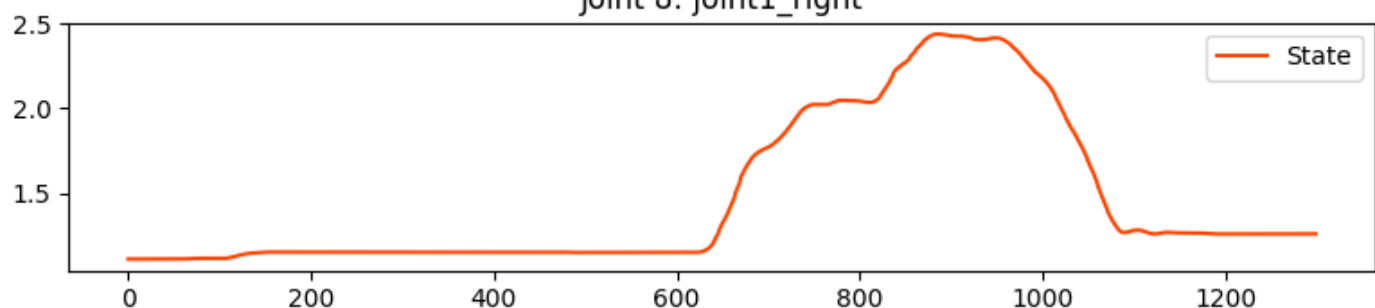


Joint 9: joint2_right

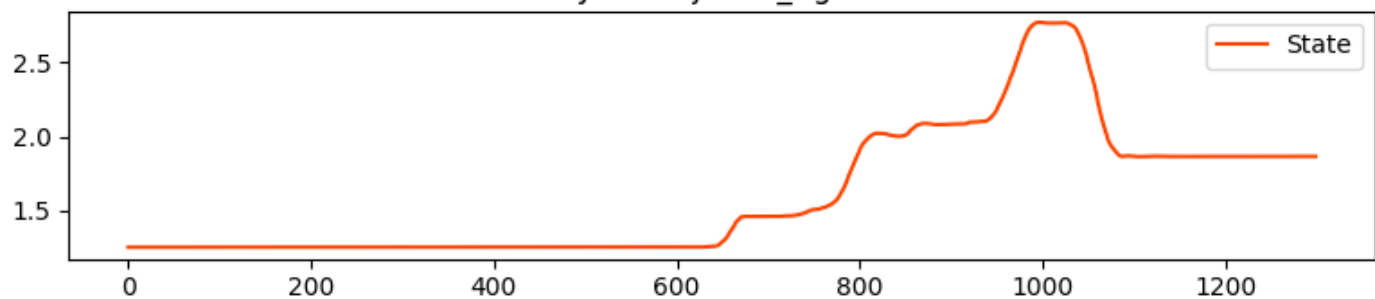


Joint 10: joint3_right

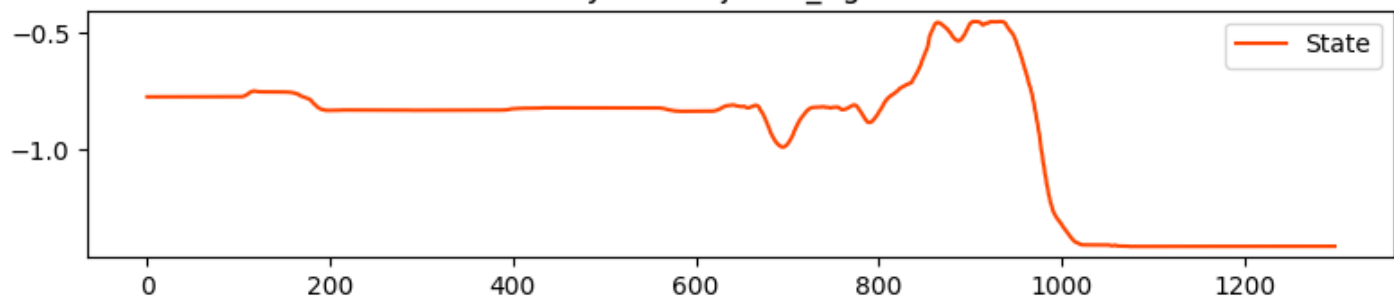


Joint 11: joint4_right

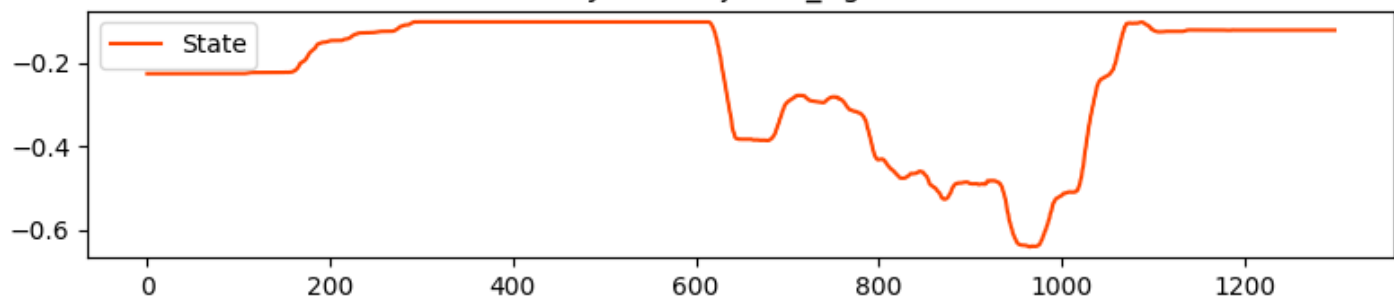

Joint 12: joint5_right

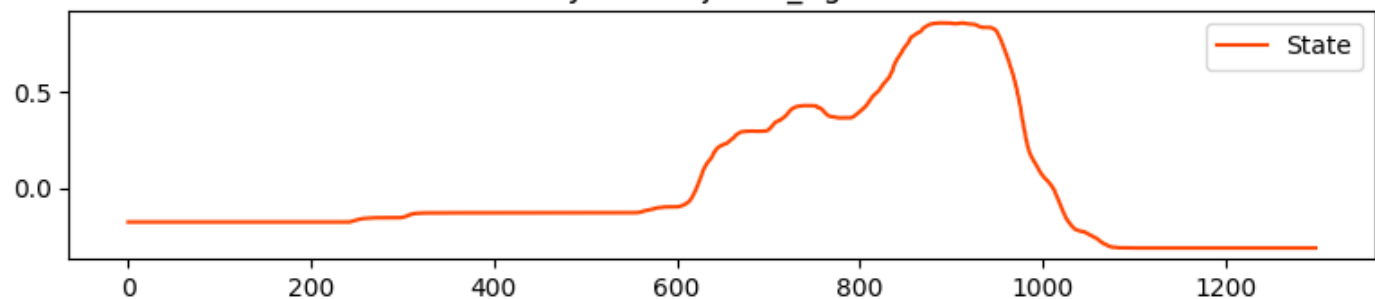

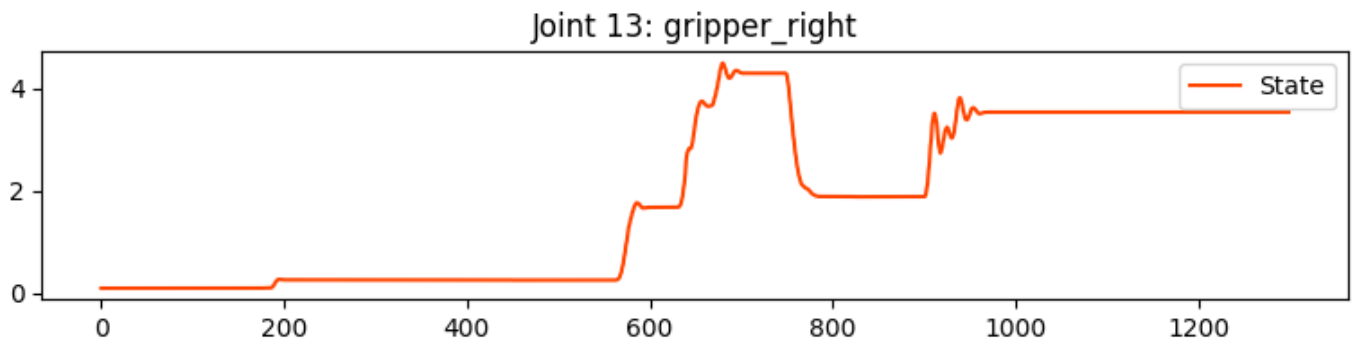

`visualize_episodes.py` 主要命令行参数：

- `--datasets`：数据集存放路径
- `--episode_idx`：数据集索引号

3.4 重播数据集

在 `mobile_aloha` 中 `source venv/bin/activate` 后执行 `python replay_data.py --episode ./datasets/episode_0.hdf5` 即可重播数据集

`replay_data.py` 主要命令行参数：

- `--episode`：重播的数据集

4 ACT 模型训练推理

4.1 模型训练

在 `mobile_aloha` 文件夹中 `source venv/bin/activate` 后执行 `python train.py` 即可训练模型

`train.py` 主要命令行参数：

- `--datasets`：采集数据集存放路径
- `--ckpt_dir`：训练模型保存路径
- `--ckpt_name`：最佳模型保存名称
- `--pretrain_ckpt`：预训练模型
- `--num_episodes`：数据集数量
- `--batch_size`：批次大小
- `--epochs`：迭代次数
- `--use_robot_base`：是否训练底盘（默认为false）
- `--use_depth_image`：是否训练深度图（默认为false）
- `--use_depth_image`：是否使用单臂（默认为false）

4.2 模型推理

4.2.1 准备工作

- 运行realsense_camera中的 `realsense.sh` 脚本
- 运行ARX_5/follow_control中的 `follow.sh` 脚本

-
- 切记所有人员请远离机械臂工作空间
 - 切勿暴力操作机械臂
 - 如机械臂发生紧急情况, 请立即终止推理代码,如果不能终止,请立即断开机械臂电源

机械臂电源

4.2.2 模型推理

在ARX-L5-SDK文件夹中运行 `play.sh`

在mobile_aloha文件夹中 `source venv/bin/activate` 后执行 `python inference.py` 即可进行推理

`inference.py`主要命令行参数:

- `--ckpt_dir`: 模型路径

5 异常处理

机械臂断联, 关闭所有终端, 重新启动